

## Générateur d'azote Infinity 1031

Application: 1 x SCIEX LC-MS/MS


Numéro de pièce: 13-1270



### La description

L'Infinity 1031 s'appuie sur la technologie de la séparation membranaire pour fournir de l'azote de laboratoire sur site en présence d'une source d'air existante. Capable de fonctionner 24h/24 à plein régime si besoin, il ne nécessite que des opérations de maintenance réduites, constituant ainsi une solution durable et fiable pour les instruments de LC-MS SCIEX.

- **Types de gaz** Azote, Air
- **Compresseur intégré:** Non
- **Types d'application:** 1 x SCIEX LC-MS/MS

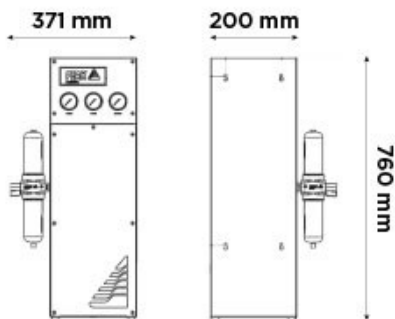

### Principales caractéristiques

- Capable de fournir la plupart des systèmes Sciex LC-MS / MS
- Fonctionnement 24h / 24 et 7j / 7 avec des performances optimales
- Le gaz est fourni sur demande afin que le générateur fonctionne selon votre horaire
- Peu de pièces mobiles signifie peu de maintenance et garantit une longue durée de vie du générateur
- Configuration minimale requise
- Fonctionnement totalement silencieux
- Garantie complète sur site de 12 mois

## Spécifications techniques

### Générateur d'azote Infinity 1031

Type de gaz	Azote
Débit de gaz max:	19
Pression de sortie max:	110psi/7,6bar
Type de gaz	Air
Débit de gaz max:	26L/min
Pression de sortie max:	110psi/7,6bar
Type de gaz	Air
Débit de gaz max:	25L/min
Pression de sortie max:	110psi/7,6bar
Pression de sortie max:	110psi/7,6bar
Pression d'entrée min:	120psi/8,3bar
Pression d'entrée max:	145psi/10bar
Min Air Inlet Flow:	115
Qualité d'entrée d'air min:	1.4.1
Temps de mise en route:	30 mins
Voltage:	N/A
Fréquence:	N/A
Courant:	N/A
Température de fonctionnement max:	30°C / 86°F
Particules:	<0.01 µm
Accréditations:	CE
Taille (HxLxP) mm	760 x 365 x 200 mm
Taille (HxLxP) pouces	29,9 x 14,4 x 7,9 inches
Poids du générateur	14kg / 30,8lbs

## [PEAK Protected]™

Les générateurs de gaz de Peak Scientific sont une référence internationale de fiabilité, confort et performance en laboratoire. Ils sont couverts par une garantie de 12 mois. Vous pouvez toutefois assurer la **[Protection]** de votre investissement au-delà de cette période, par notre couverture intégrale d'entretien du générateur.

Nos forfaits d'entretien de classe internationale offrent un programme de maintenance préventive tout en vous assurant un accès immédiat à l'assistance technique à travers le monde, ainsi qu'une réponse prioritaire sur site dans l'éventualité peu probable d'une panne

- Pour commander des pièces, visitez : [www.peakscientific.com/ordering/](http://www.peakscientific.com/ordering/)
- Pour les plans de service, visitez : [www.peakscientific.com/service/service-plans/](http://www.peakscientific.com/service/service-plans/)

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

**Peak Scientific UK**  
Tel: +44 (0)141 812 8100  
Fax: +44 (0)141 812 8200

**Peak Scientific SARL**  
Tel: +1-800-767-6532  
Fax: +1-978-608-9503

Pour une liste complète de nos  
emplacements des bureaux, veuillez  
visiter :

Web: [www.peakscientific.fr](http://www.peakscientific.fr)  
Email: [discover@peakscientific.com](mailto:discover@peakscientific.com)



0003