

Genius 1052

Générateur d'azote

Numéro de pièce: 10-9556




La description

Pour les applications nécessitant de chauffer ou de refroidir de l'azote, le Genius 1052 est équipé de la technologie très efficace de lit de charbon moléculaire pour vous fournir un azote gazeux propre. Développé sur la base de modulateur GCxGC, ce modèle peut être utilisé avec une large gamme d'applications nécessitant l'apport d'azote similaire.



Types d'application

Modulateurs GCxGC

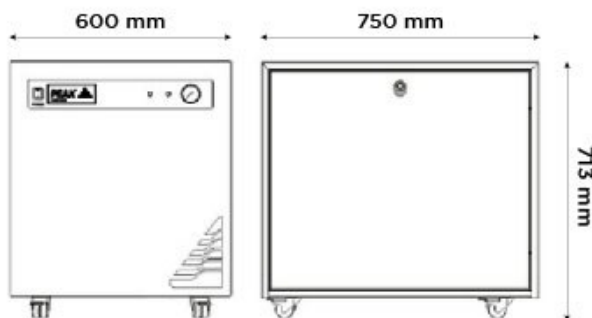

Generator Details

- **Types de gaz:** Azote
- **Compresseur intégré:** Oui

Principales caractéristiques

- La double sortie de gaz fournit du gaz de chauffage et de refroidissement
- La technologie innovante CMS et PSA garantit des performances élevées
- Solution basée sur un compresseur, pas besoin d'alimentation en air externe
- Configuration minimale requise
- Source d'azote gazeux très économique avec de faibles coûts d'exploitation à vie
- La dernière génération de compresseurs situés dans une chambre isolée réduisant le bruit et les vibrations
- Indication de service pour permettre la planification de la maintenance préventive
- Le gaz est fourni sur demande afin que le générateur fonctionne selon votre horaire
- Les roues facilitent la manœuvre du générateur dans le laboratoire
- Garantie complète sur site de 12 mois

Spécifications techniques

Générateur d'azote Genius 1052

Type de gaz	Azote
Débit de gaz max:	20L/min
Pression de sortie max:	30psi/2,1bar
Type de gaz	Azote
Débit de gaz max:	12L/min
Pression de sortie max:	20psi/1,4bar
Pression de sortie max:	30psi/2,1bar
Consommation d'eau:	TBC
Temps de mise en route:	30 mins
Voltage:	230 ± 10%
Fréquence:	50 / 60 Hz
Courant:	7
Niveau de bruit:	54
Accréditations:	CE, CSA, FCC
Taille (HxLxP) mm	713 x 600 x 750 mm
Taille (HxLxP) pouces	28,1 x 23,6 x 29,5 inches
Poids du générateur	120kg / 264lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

