

Générateurs d'azote ultra haute pureté NG5000

Application: GC, ICP, DSC, DMA


Numéro de pièce: 10-2310 (230v) - UK | 10-2320 (230v) - EU | 10-2330 (110v) - US



La description

Le NG5000 fournit un azote d'un ultra haut degré de pureté à des limites de détection de traces grâce à la technologie d'absorption à balancement de pression à des débits de 5 L/min pour les applications GC.

- **Types de gaz** Azote
- **Compresseur intégré:** Non
- **Types d'application:** GC, ICP, DSC, DMA

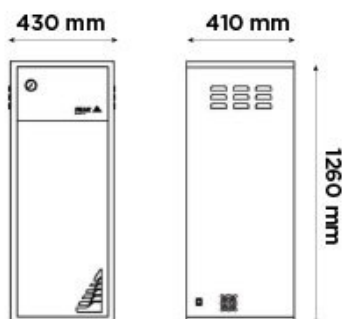

Principales caractéristiques

- Convient aux applications telles que GC, DSC, DMA
- Convient aux applications nécessitant une très haute pureté
- Disponible avec ou sans compresseur externe
- Contient une colonne de tamis moléculaire de carbone auto-régénérant
- Le gaz est fourni sur demande afin que le générateur fonctionne selon votre horaire
- Garantie complète sur site de 12 mois

Spécifications techniques

Générateurs d'azote ultra haute pureté NG5000	
Type de gaz	Azote
Débit de gaz max:	5L/min
Pression de sortie max:	80psi/5,5bar
Pression de sortie min:	80psi/5,5bar
Pression d'entrée min:	120psi/8,3bar
Pression d'entrée max:	130psi/9bar
Voltage:	110 / 230 ± 10% VAC
Fréquence:	50 / 60 Hz
Courant:	0.5 Amps / 1.2 Amps
Température de fonctionnement max:	25°C / 77°F
Accréditations:	CE
Taille (HxLxP) mm	1260 x 430 x 410 mm
Taille (HxLxP) pouces	49,6 x 16,9 x 16,1 inches
Poids du générateur	80kg / 176lbs

[PEAK Protected]TM

Les générateurs de gaz de Peak Scientific sont une référence internationale de fiabilité, confort et performance en laboratoire. Ils sont couverts par une garantie de 12 mois. Vous pouvez toutefois assurer la **[Protection]** de votre investissement au-delà de cette période, par notre couverture intégrale d'entretien du générateur.

Nos forfaits d'entretien de classe internationale offrent un programme de maintenance préventive tout en vous assurant un accès immédiat à l'assistance technique à travers le monde, ainsi qu'une réponse prioritaire sur site dans l'éventualité peu probable d'une panne

- Pour commander des pièces, visitez : www.peakscientific.com/ordering/
- Pour les plans de service, visitez : www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific SARL
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Pour une liste complète de nos
emplacements des bureaux, veuillez
visiter :

Web: www.peakscientific.fr
Email: discover@peakscientific.com



0003