

Precision Zero Air 18L


Conçu spécifiquement pour fournir un support de flamme

Numéro de pièce: 60-0019 (110V) | 60-0018 (230V)



La description

Les générateurs d'air zéro Precision sont conçus spécifiquement pour fournir de l'air propre, sec, exempt d'hydrocarbures pour être utilisé comme gaz de support de flamme pour GC aux deux limites de détection standard et oligo.

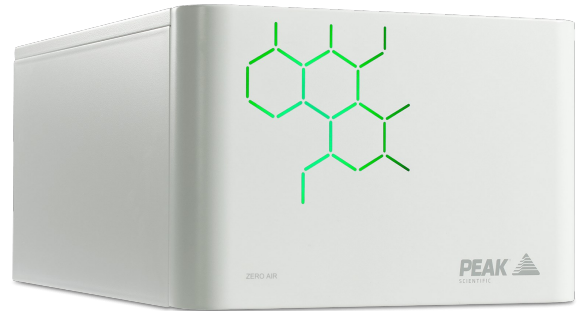


Generator Details

- **Types de gaz:** Air
- **Compresseur intégré:** Non

Principales caractéristiques

- S'intègre aux produits Precision existants, avec la même conception modulaire et empilable
- Teneur en hydrocarbures (sous forme de méthane) <math>< 0,05 \text{ ppm}</math> pour une pureté à la pointe du marché
- Jusqu'à 18 L / min de Zero Air Jusqu'à 80 psi / 5,5 bar de pression de sortie
- Exigences minimales de maintenance, pas de remplacement coûteux de la chambre de catalyseur
- Risque considérablement réduit de contaminants entrant dans le système et aucun risque de manquer de gaz
- Esthétique élégante et contemporaine et design fonctionnel
- Fonction d'éclairage indicative d'état (préchauffage orange, prêt vert)
- Compatible avec le compresseur d'air de précision
- Garantie complète sur site de 12 mois

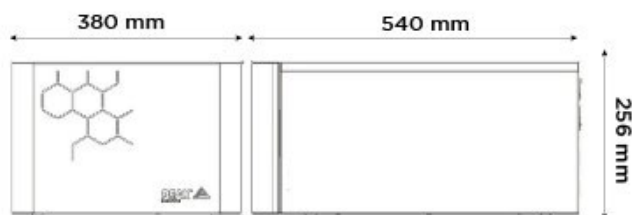

Spécifications techniques

	Precision Zero Air 18L
Type de gaz	Air
Débit de gaz max:	18L/min
Pression de sortie max:	80psi/5,5bar
Teneur en hydrocarbures:	<0.05ppm
Pression de sortie max:	80psi/5,5bar
Raccord de sortie de gaz:	1 x 1/4" BSPP
Pression d'entrée min:	110psi/7,6bar
Pression d'entrée max:	125psi/8,6bar
Min Air Inlet Flow:	18L
Qualité d'entrée d'air min:	ISO 8753-1:2010 Class 1.4.1 or Precision Air Compressor
Temps de mise en route:	60 mins
Consommation électrique:	594 / 759 W
Voltage:	110 / 230 V
Fréquence:	50 / 60 Hz
Courant:	3.3 - 5.4 A
Chaleur produite:	2590
Accréditations:	CE, FCC, CSA
Taille (HxLxP) mm	256 x 380 x 540 mm
Taille (HxLxP) pouces	10,1 x 15 x 21,3 inches
Poids du générateur	25kg / 55lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

