

Générateur d'azote Genius 1051

Application: LC-MS / MS 8045, 8050 et 8060
en mode gaz par défaut


Numéro de pièce: 10-9558



La description

Le Genius 1051 a été développé pour fournir de l'azote gazeux et de l'air sec au LC-MS 8050 de Shimadzu dans des laboratoires disposant d'une alimentation électrique allant jusqu'à 230 V. Nous avons équipé le Genius 1051 de deux compresseurs d'air interne permettant de ne pas dépendre d'une alimentation en air interne. Les débits d'azote et d'air sec peuvent être configurés pour obtenir un débit total de 25 L/min réparti entre ces deux types de gaz.

- **Types de gaz** Azote, Air
- **Compresseur intégré:** Oui
- **Types d'application:** LC-MS / MS 8045, 8050 et 8060 en mode gaz par défaut

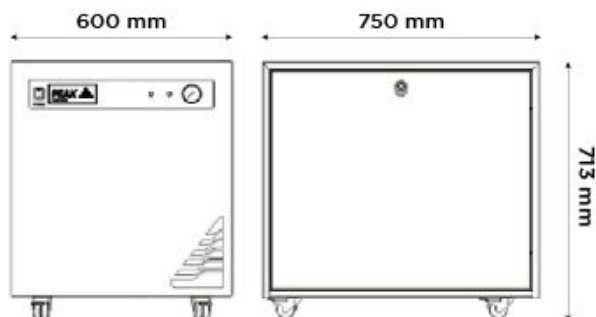

Principales caractéristiques

- La technologie innovante CMS et PSA garantit des performances élevées
- Solution basée sur un compresseur, pas besoin d'alimentation en air externe
- Configuration minimale requise
- Source d'azote gazeux très économique avec de faibles coûts d'exploitation à vie
- La dernière génération de compresseurs situés dans une chambre isolée réduisant le bruit et les vibrations
- Indication de service pour permettre la planification de la maintenance préventive
- Le gaz est fourni sur demande afin que le générateur fonctionne selon votre horaire
- Les roues facilitent la manœuvre du générateur dans le laboratoire
- Garantie complète sur site de 12 mois

Spécifications techniques

Générateur d'azote Genius 1051

Type de gaz	Azote
Débit de gaz max:	25L/min
Pression de sortie max:	110psi/7,6bar
Type de gaz	Air
Débit de gaz max:	25L/min
Pression de sortie max:	100psi/6,9bar
Pression de sortie max:	110psi/7,6bar
Temps de mise en route:	30 mins
Voltage:	230 ± 10% VAC
Fréquence:	50 / 60 Hz
Courant:	7 Amps
Accréditations:	CSA, CE
Taille (HxLxP) mm	713 x 600 x 750 mm
Taille (HxLxP) pouces	28,1 x 23,6 x 29,5 inches
Poids du générateur	118kg / 259,6lbs

[PEAK Protected]TM

Les générateurs de gaz de Peak Scientific sont une référence internationale de fiabilité, confort et performance en laboratoire. Ils sont couverts par une garantie de 12 mois. Vous pouvez toutefois assurer la **[Protection]** de votre investissement au-delà de cette période, par notre couverture intégrale d'entretien du générateur.

Nos forfaits d'entretien de classe internationale offrent un programme de maintenance préventive tout en vous assurant un accès immédiat à l'assistance technique à travers le monde, ainsi qu'une réponse prioritaire sur site dans l'éventualité peu probable d'une panne

- Pour commander des pièces, visitez : www.peakscientific.com/ordering/
- Pour les plans de service, visitez : www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific SARL
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Pour une liste complète de nos
emplacements des bureaux, veuillez
visiter :

Web: www.peakscientific.fr
Email: discover@peakscientific.com



0003