

Precision Air Compressor


Compresseur d'air Solaris pour Precision Range

Numéro de pièce: 65-0555 (230V) | 65-1555 (110V)



La description

Le compresseur d'air de précision est conçu et fabriqué spécifiquement pour fournir une source d'air comprimé dédiée et entièrement intégrée pour les générateurs de gaz Precision Nitrogen et Precision Zero Air. Logé dans le même facteur de forme compact et empilable que les générateurs, le module Precision Air Compressor peut être ajouté à n'importe quelle pile Precision - généralement comme unité de base - pour vous offrir une solution de gaz GC autonome complète, même en l'absence d'alimentation domestique. disponible. Grâce à un système de montage de compresseur duplex unique, le compresseur d'air de précision bénéficie également d'un faible bruit et de vibrations, ce qui le rend relativement silencieux dans un laboratoire typique.

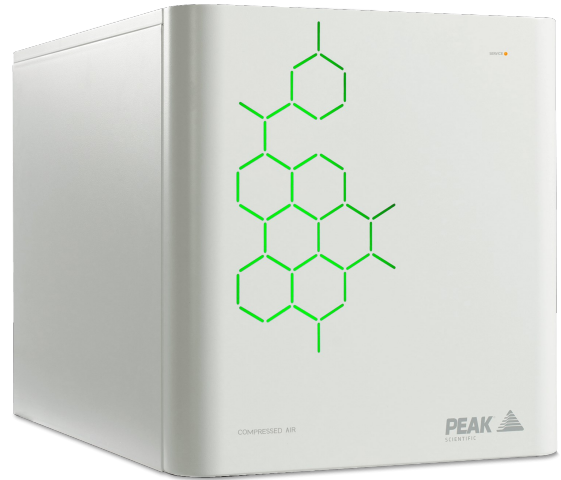

Types d'application


Alimentation en air indépendante pour les modules Precision

Generator Details

- **Types de gaz:** Air
- **Compresseur intégré:** Oui

Principales caractéristiques

- Alimentation en air comprimé pour les générateurs Precision Nitrogen et Zero Air
- Une seule unité peut alimenter les générateurs Precision Nitrogen et Zero Air dans une pile
- Système de montage de compresseur duplex pour amortir le bruit et les vibrations
- Service & indicateurs de statut de réparation
- Garantie complète sur site de 12 mois

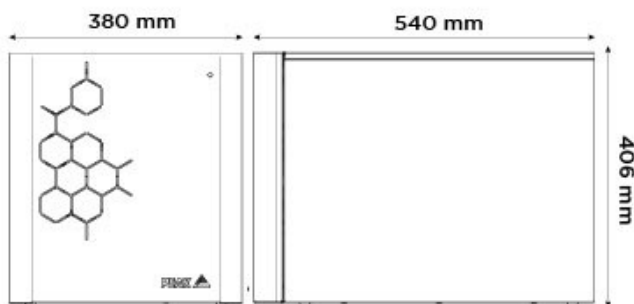

Spécifications techniques

Compresseur d'air de précision

Type de gaz	Air
Débit de gaz max:	VariousL/min
Pression de sortie max:	120psi/8,3bar
Pression de sortie max:	120psi/8,3bar
Raccord de sortie de gaz:	1 x 1/4" BSPP
Consommation électrique:	510 / 1150 W
Voltage:	110 / 230 V
Fréquence:	50 / 60 Hz
Courant:	10 A (110V) / 2.45 A (230V)
Chaleur produite:	1740 - 3922 (BTU)
Température de fonctionnement max:	35°C / 95°F
Accréditations:	CSA, FCC, CE
Taille (HxLxP) mm	406 x 380 x 540 mm
Taille (HxLxP) pouces	16 x 15 x 21,3 inches
Poids du générateur	42kg / 92,4lbs

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific gas generators define the benchmark in reliability, convenience and performance in laboratories around the world, and come backed with a 12 month warranty. Beyond this period however you can ensure that your investment continues to be **[Protected]** by our comprehensive generator care cover.

Our world-class aftercare support packages deliver a program of scheduled preventative maintenance whilst giving you the reassurance of instant access to worldwide technical support and priority on-site response in the untimely event of a breakdown.

- For ordering parts visit: www.peakscientific.com/ordering/
- For service plans visit: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
Tel: +1-800-767-6532
Fax: +1-978-608-9503

Peak Scientific China
Tel: +86 21 5079 1190
Fax: +86 21 5079 1191
For a full list of our worldwide office locations, please visit:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

