

## Générateur d'azote NG5000A

Application: GC, ICP, DSC, DMA


**Numéro de pièce:** 10-1292 (230v) - UK | 10-1295 (230v) - EU | 10-1291 (110v) - US



### La description

Le NG5000A fournit un azote d'un ultra haut degré de pureté à des limites de détection de traces grâce à la technologie d'absorption à balancement de pression à des débits de 5 L/min pour les applications GC.

- **Types de gaz** Azote
- **Compresseur intégré:** Oui
- **Types d'application:** GC, ICP, DSC, DMA

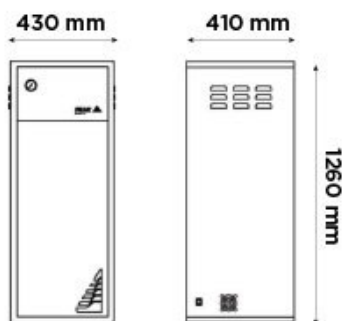

### Principales caractéristiques

- Convient aux applications telles que GC, DSC, DMA Convient aux applications nécessitant une très haute pureté
- Disponible avec ou sans compresseur externe
- Contient une colonne de tamis moléculaire de carbone auto-régénérant
- Le gaz est fourni sur demande afin que le générateur fonctionne selon votre horaire
- Garantie complète sur site de 12 mois

## Spécifications techniques

	Générateur d'azote NG5000A
Type de gaz	Azote
Débit de gaz max:	5L/min
Pression de sortie max:	80psi/5,5bar
Pression de sortie max:	80psi/5,5bar
Pureté max:	upto 99.9995%
Pression d'entrée min:	120psi/8,3bar
Pression d'entrée max:	130psi/9bar
Temps de mise en route:	8 hours
Consommation électrique:	132 Watts
Voltage:	110 / 230 ± 10% VAC
Fréquence:	50 / 60 Hz
Courant:	0.5 Amps / 1.2Amps
Température de fonctionnement max:	25°C / 77°F
Accréditations:	CE
Taille (HxLxP) mm	1235 x 449 x 406,5 mm
Taille (HxLxP) pouces	48,6 x 17,7 x 16 inches
Poids du générateur	88kg / 193,6lbs

# [PEAK Protected]<sup>TM</sup>

Les générateurs de gaz de Peak Scientific sont une référence internationale de fiabilité, confort et performance en laboratoire. Ils sont couverts par une garantie de 12 mois. Vous pouvez toutefois assurer la **[Protection]** de votre investissement au-delà de cette période, par notre couverture intégrale d'entretien du générateur.

Nos forfaits d'entretien de classe internationale offrent un programme de maintenance préventive tout en vous assurant un accès immédiat à l'assistance technique à travers le monde, ainsi qu'une réponse prioritaire sur site dans l'éventualité peu probable d'une panne

- Pour commander des pièces, visitez : [www.peakscientific.com/ordering/](http://www.peakscientific.com/ordering/)
- Pour les plans de service, visitez : [www.peakscientific.com/service/service-plans/](http://www.peakscientific.com/service/service-plans/)

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

**Peak Scientific UK**  
Tel: +44 (0)141 812 8100  
Fax: +44 (0)141 812 8200

**Peak Scientific SARL**  
Tel: +1-800-767-6532  
Fax: +1-978-608-9503

Pour une liste complète de nos  
emplacements des bureaux, veuillez  
visiter :  
Web: [www.peakscientific.fr](http://www.peakscientific.fr)  
Email: [discover@peakscientific.com](mailto:discover@peakscientific.com)



0003